

くつろぎ指定席

マッサージチェア
CHD-5506/CHD-5500
CHD-5200

THRIVE

マッサージ機器

CHD-5506 / CHD-5500
CHD-5200

仕様一覧

	マッサージチェア CHD-5506 (K) ブラック	マッサージチェア CHD-5500 (K) ブラック	マッサージチェア CHD-5200 (K) ブラック	
販売名	マッサージチェア CHD-5506	マッサージチェア CHD-5500	マッサージチェア CHD-5200	
標準価格(税別)	218,000円	178,000円	128,000円	
医療機器認証番号	225AKBZX00107A01	225AKBZX00107000	225AKBZX00068000	
肩位置検出センサー	●	—	—	
背すじ	横回転もみ玉	●	●	
	自動コース	3種類	3種類	
	手動コース	71種類(エアーマッサージ含む)	47種類(エアーマッサージ含む)	23種類(脚マッサージ含む)
	もみ玉 肩位置調節	—	5段階	5段階
	もみ玉 幅調節	—	3段階	無段階
もみ玉 移動距離(最長)	—	約67cm	約54cm	
肩	エアーマッサージ ^{※1}	●	—	
	腰 エアーマッサージ ^{※1}	●	—	
座	おしり エアーマッサージ ^{※1}	●	—	
	エアーマッサージ ^{※1}	●	●	
脚	もみボード	—	●	
	突起マッサージ	固定ボード	回転ローラー	
脚部スライド調節	—	約12cm	—	
背もたれ角度	—	約115°~約140°	約115°~約140°	
定格入力	—	101W	80W	
付属品	ヘッドレスト・背クッション・肩エアーマッサージ・座クッション	ヘッドレスト・背クッション・座クッション	ヘッドレスト・背クッション・座クッション	
質量	約43kg	約38kg	約29kg	
電気代(1日1時間使用) ^{※2}	—	約67円/月	約53円/月	
外形寸法				
	電動リクライニング 背もたれ・脚(運動)	電動リクライニング 背もたれ・脚(運動)	電動リクライニング 背もたれ・脚(運動)	
JANコード	4975287605032	4975287605018	4975287604899	
梱包寸法(幅×奥行×高さ)・梱包時重量	約108×約76×約66cm・約48kg	約108×約76×約66cm・約43kg	約96×約71×約64cm・約35kg	
<small>■定格電圧:AC100V ■定格周波数:50/60Hz ■定格時間:20分 ■電源コード長さ:約2m ■オートタイマー:約15分 ■張地:合成皮革 ■一般的名称:家庭用電気マッサージ器 ■医療機器製造販売業許可番号:27B2X00055 ■医療機器製造販売業:大東電機工業(株)〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号</small>				

※1 エアーマッサージ空気圧:48kPa以下 ※2 電気代(新電力料金目安単価22円/kWhで計算)

⚠️ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をお読みのうえ正しくお使いください
 ◎次の人は必ず医師に相談のうえ使用する●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性腫瘍のある人●心臓に障害のある人●妊娠中や出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)●背骨に異常がある人、曲がっている人●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の人●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人●その他医療機関で治療中の人 ◎次の人は使用しない●医師からマッサージを禁じられている人(血栓(塞栓)症、重度の動脈硬化(瘤)、急性静脈炎(腫)、各種皮膚炎、皮下組織の炎症を含む皮膚感染症など)●使用中、体に異常を感じたときはただちに使用を中止し医師に相談する ◎次のようなときは使用しない●疲労が激しいとき●酒に酔っているとき●湿疹が生じているとき【守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります】●使用前にマッサージ機構部の張地が破れていないか、また、その他の部分にも破れていないか確認する●子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない●子供に遊ばせない●幼児の手の届く範囲では使用しない【事故やけが、故障のおそれがあります】●絶対に分解や修理、改造をしない【発火や異常動作をしてしげをすおそれがあります】

販売元

スライヴ 株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号
ホームページアドレス <http://www.daito-thrive.co.jp>

■商品のお買い、取り扱い方法、修理などのお問い合わせは
お客様相談センター 受付時間(祝日を除く月~金)9:00~17:00

ナビダイヤル ☎0570-064-762 電話FAX番号はお間違いのないよう
お確かめのうえおかけください

◎ナビダイヤルがご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください

☎06-6783-8627 FAX.06-6783-8633

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号

お求めは当店で……

- 本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
- 印刷物と実物とは色が若干異なることがあります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの記載内容は2014年2月現在のものです。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

もみ心地、新感覚。心地よさを追求する新メカ搭載。



写真はCHD-5506

くつろぎ指定席

マッサージチェア

心とからだ解放されるとっておきの席。
特別なひとときで癒やされるマッサージチェア。

横回転するもみ玉により、親指で「こねる」ようなもみ技を実現。
体のラインをなめらかに捉え、しっかりとマッサージ。

くつろぎ指定席

マッサージチェア
CHD-5506/CHD-5500
CHD-5200

肩位置検出センサー

肩の位置を自動で認識して、適切なマッサージができます。
●自動コース使用時、CHD-5506のみ



首から腰・おしりまで広い範囲をマッサージ


コリ固まった首、疲れがたまりやすい肩や肩甲骨周りは上のもみ玉がしっかりと施療。また、腰のたるさは、上のもみ玉がしっかりとほぐし、下のもみ玉は、おしりまで届き、やさしくマッサージします。

背すじ「横回転もみ玉」マッサージ

もみ玉が横回転することで…

●親指で、じっくりと「こねる」ような手もみ感覚を実現しました。●肩や肩甲骨、背すじの凹凸形状をやさしく滑るように捉えます。●余計な力を分散し、なめらかな動きで心地よくマッサージします。

もみ玉が横回転しながらなめらかに動作

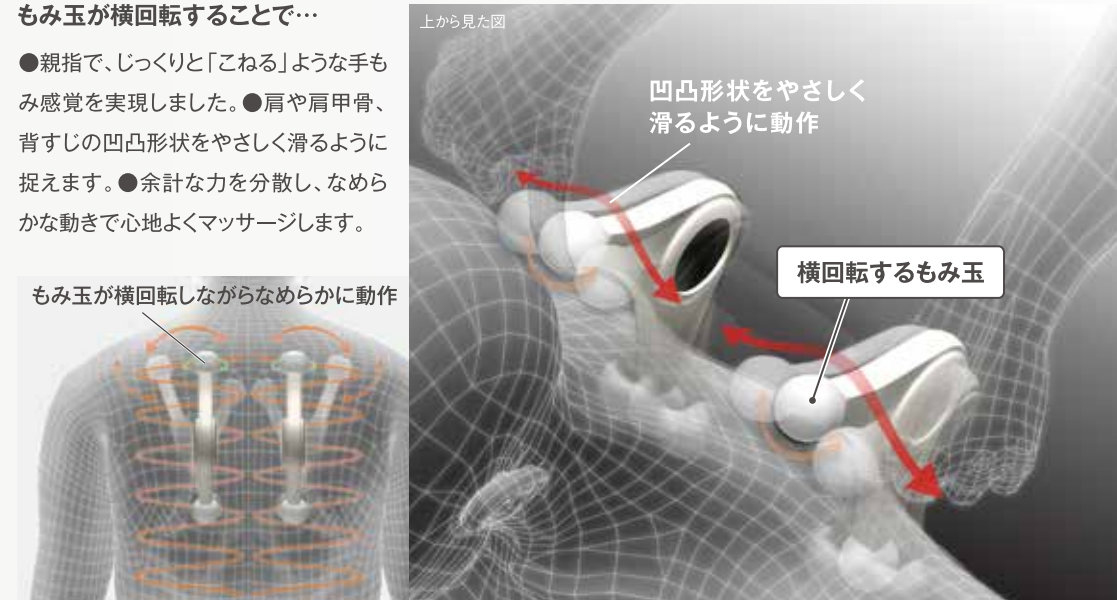

やさしいもみ心地のエアーマッサージ。 CHD-5506/CHD-5500のみ
写真はCHD-5506仕様

肩・座エアーマッサージ



肩
空気のかで締めつけて、肩口や腕周辺のコリや疲れをほぐします。

座
腰・おしりのエアーマッサージは運動で動作
腰部分をしっかりと締めつけて、骨盤周りの筋肉をほぐし、おしりは空気のかで押し上げます。

CHD-5500には腰エアーマッサージは搭載していません。


脚エアーマッサージ

ふくらはぎの横・後、脚の側面を、効果的に加圧・減圧し、重い、だるい疲れをほぐします。



CHD-5500にはふくらはぎ後部エアーマッサージは搭載していません。

複雑な操作は不要。お好みのマッサージをどうぞ。

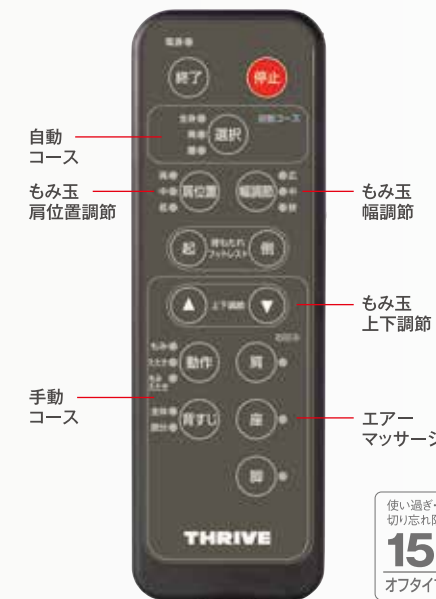

写真はCHD-5506仕様

自動コース(全身・肩・腰)

施療部を効果的にマッサージするようにプログラムされた3種類の自動コースからお選びいただけます。

手動コース(71種類) CHD-5506仕様

背すじマッサージ(もみ、たたき、もみたたき、背すじ全体、背すじ部分)、エアーマッサージ(肩、座、脚)を組み合わせると、71種類のマッサージをお選びいただけます。

CHD-5500仕様
手動コース(47種類)

CHD-5200仕様
手動コース(23種類)

脚マッサージ

もみボードが、ふくらはぎを押し上げ筋肉の疲れを緩和。さらに、突起ローラーが、回転しながらほぐします。



CHD-5200のみ

脚部スライド調節

背の高い人や脚の長い人が使用する際にフィットレストを最長12cm伸ばすことができます。



CHD-5506/CHD-5500のみ

座りやすく、移動しやすい、低座面&軽量設計を実現。



マッサージチェア
CHD-5506 (K) ブラック
主な仕様: 横回転もみ玉
■エアーマッサージ/肩・座(おしり)・脚



マッサージチェア
CHD-5500 (K) ブラック
主な仕様: 横回転もみ玉
■エアーマッサージ/座(おしり)・脚



マッサージチェア
CHD-5200 (K) ブラック
主な仕様: 横回転もみ玉
■もみボード/回転ローラー/脚

マッサージするときはヘッドレストを後ろに回すかはずしてご使用ください。写真、イラストはイメージです。