

THRIVE

マッサージ機器

スライヴ マッサージチェア シリーズ
CHD-5536 / CHD-5530

Active
3D



仕様一覧

マッサージチェア CHD-5536		マッサージチェア CHD-5530	
			
(K)ブラック (C)ベージュ		(K)ブラック (C)ベージュ	
販売名	マッサージチェア CHD-5536	マッサージチェア CHD-5530	
標準価格(税別)	299,800円	198,000円	
医療機器認証番号	225AKBZX00164000	225AKBZX00164A01	
肩位置検出センサー	●	●	
横回転もみ玉	●	●	
自動コース	3種類	3種類	
手動コース	71種類(エアーマッサージ、脚マッサージ含む) 速さ、強さ、幅調節機能を組み合わせると639種類	47種類(エアーマッサージ、脚マッサージ含む) 速さ、強さ、幅調節機能を組み合わせると492種類	
背すじ	もみ玉 強さ	3段階	3段階
	肩	3段階	3段階
	腰	3段階	3段階
	もみ玉 肩位置調節	5段階	5段階
	もみ玉 幅調節	3段階	3段階
もみ玉 移動距離(最長)	約64.5cm	約64.5cm	
肩	エアーマッサージ*1	●	—
座	腰 エアーマッサージ*1	●	—
	おしり エアーマッサージ*1	●	●
脚	もみボード	●	●
	突起マッサージ	固定ボード、突起ローラー、ふくらはぎローラー	固定ボード、突起ローラー、ふくらはぎローラー
背もたれ角度	約120°～約145°	約120°～約145°	
定格入力	120W	120W	
付属品	ヘッドレスト・背クッション・肩エアークッション・座クッション	ヘッドレスト・背クッション・座クッション	
質量	約42kg	約38kg	
電気代(1日1時間使用)*2	約79円/月	約79円/月	
外形寸法			
	幅 約67cm 高さ 約96cm 奥行 約133cm	幅 約67cm 高さ 約96cm 奥行 約175cm	
JANコード	4975287605179	4975287605186	4975287605155 4975287605162
梱包寸法(幅×奥行×高さ)・ 梱包時重量	約100×約70×約79cm・約49kg	約100×約70×約79cm・約45kg	

■定格電圧:AC100V ■定格周波数:50/60Hz ■定格時間:20分 ■電源コード長さ:約2m ■オートタイマー:約15分 ■張地:合成皮革 ■一般的名称:家庭用電気マッサージ器
■医療機器製造販売許可番号:27B2X00055 ■医療機器製造販売元:大東電機工業(株) 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号

※1 エアーマッサージ空気圧:48kPa以下 ※2 電気代(新電力料金目安単価22円/kWhで計算)

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をお読みのうえ正しくお使いください

◎次の人は必ず医師に相談のうえ使用する ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人 (倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●その他医療機関で治療中の人 ◎次の人は使用しない ●医師からマッサージを禁じられている人(血栓[塞栓]症、重度の動脈のう(瘤)、急性静脈のう(瘤)、各種皮膚炎、皮下組織の炎症を含む皮膚感染症など) ●使用中、体に異常を感じたときはただちに使用を中止し医師に相談する ◎次のようなときは使用しない ●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき 【守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります】 ●使用前にマッサージ機構部の張地が破れていないか、また、その他の部分にも破れがないか確認する ●子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない ●子供に遊ばせない ●幼児の手の届く範囲では使用しない 【事故やけが、故障のおそれがあります】 ●絶対に分解や修理、改造をしない 【発火や異常動作をしてけがをするおそれがあります】



CHD-5536 (K)

くつろぎ指定席

マッサージチェア

心とからだ解放されるとっておきの席。
特別なひとときで癒されるマッサージチェア。

販売元
スライヴ株式会社
〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号
ホームページアドレス <http://www.daito-thrive.co.jp>

■商品のお買い物、取り扱い方法、修理などのお問い合わせは
お客様ご相談センター 受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00

ナビダイヤル **0570-064-762** 電話・FAX番号はお間違えないよう
お確かめのうえおかけください

◎ナビダイヤルがご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください

06-6783-8627 FAX.06-6783-8633

製造販売元
大東電機工業株式会社
〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号

お求めは当店です……

- 本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
- 印刷物と実物とは色が若干異なることがあります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

肩・腰、それぞれに[強][中][弱]3段階のもみ感を設定。一人ひとりにフィットした、心地よいマッサージを実現。

Active 3D

アクティブ3D


マッサージを受ける人の体型やコリの具合、感覚によって違いがあるもみ感の“心地よさ”。
新型メカ「アクティブ3D」では、「肩」「腰」それぞれに[強][中][弱]3段階の強弱制御機能を採用。
親指で「こねる」ようなもみ技を実現する「横回転もみ玉」&「3段階の強弱制御」で、
よりアクティブな動きが可能になった新型メカ。メリハリがありながら、やさしくなめらかなもみ感。
そして、一人ひとりにぴったりとフィットしたマッサージを実現しました。

横回転するもみ玉により、親指で「こねる」ようなもみ技を実現。
体のラインをなめらかに捉え、しっかりとマッサージ。



肩強さ・[強][中][弱]

疲れがたまりやすい肩や肩甲骨周りは、3段階のもみ玉の強さで、お好みのマッサージをお選びいただけます。

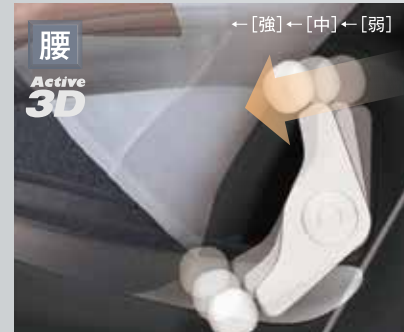

腰強さ・[強][中][弱]


お好みのもみ玉の強さ(3段階)で、腰のたるさを上のもみ玉がしっかりとほぐし、下のもみ玉は、おしりをマッサージします。

背すじ全体


背すじ全体移動距離約64.5cm(最長)。しっかりとボディラインを捉えながらもメリハリのあるマッサージを行います。

背中

凹凸の少ない背中には、もみ玉がほぼフラットに移動。均一な圧力でやさしいもみ心地が得られます。

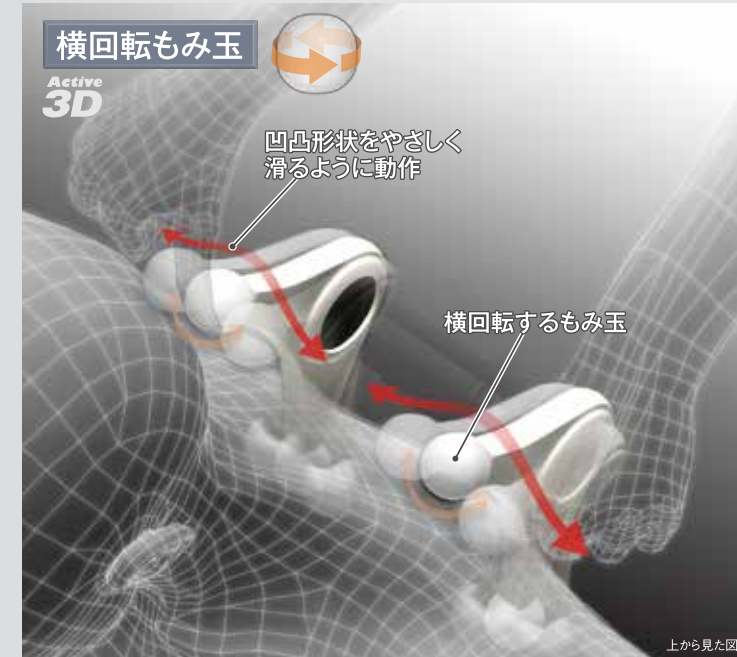

もみ玉が横回転することで…
●親指で、じっくりと「こねる」ような手もみ感覚を実現しました。●肩や肩甲骨、背すじの凹凸形状をやさしく滑るように捉えます。●余計な力を分散し、なめらかな動きで心地よくマッサージします。

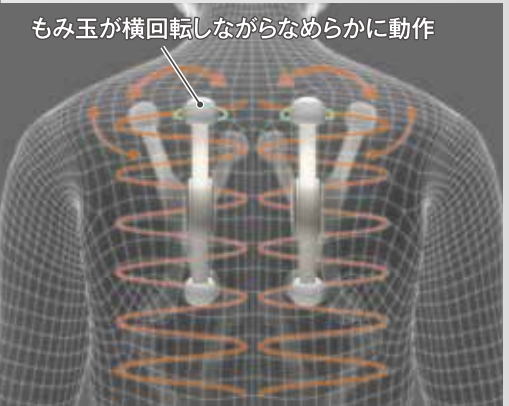

写真はCHD-5536仕様



CHD-5536 (C)

面で捉えるエアーマッサージ。

肩・座エアーマッサージ

写真はCHD-5536仕様



肩 空気力で締めつけて、肩口や腕周辺のコリや疲れをほぐします。
たたき、もみたたき動作中は肩エアバッグは膨らみません
座 腰部分をしっかりと締めつけて、骨盤周りの筋肉をほぐし、おしりは空気力で押し上げながらマッサージします。
腰・おしりのエアバッグは運動で動作

CHD-5530には肩、腰エアバッグは搭載していません。

脚全体をしっかりとマッサージ。


脚マッサージ

ふくらはぎ・足の甲は、ボードでもみマッサージ。足裏にある突起ローラーは、回転しながら、土踏まずの疲れをほぐし、ふくらはぎ後ろにあるローラーは、回転しながら、たまった疲れの緩和に効果的です。



- ① もみボード
- ② 突起ローラー(回転式)
- ③ ふくらはぎローラー(回転式)
- ④ 突起(固定ボード)

今すぐ簡単にお好みのマッサージ。複雑な操作は不要です。

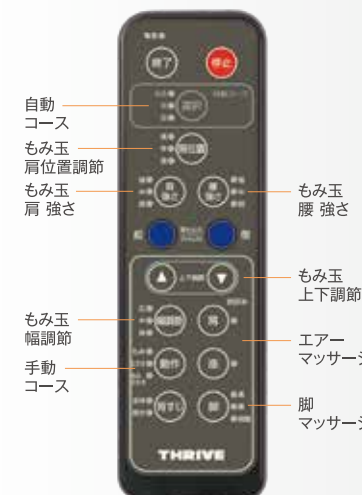

肩位置検出センサー

肩の位置を自動で認識して、適切なマッサージができます。自動コース使用時

自動コース(全身・肩・腰)

施療部を効果的にマッサージするようにプログラムされた3種類の自動コースからお選びいただけます。

手動コース(71種類) CHD-5536仕様

背すじマッサージ(もみ、たたき、もみたたき、背すじ全体、背すじ部分)、エアーマッサージ(肩・座)、脚マッサージを組み合わせると71種類[47種類]のマッサージをお選びいただけます。

速さ、強さ、幅調節機能を組み合わせると、639種類[492種類]のマッサージをお選びいただけます。
[]内はCHD-5530仕様

使い過ぎを
切り忘れ防止
15分
オフタイマー

収納に便利なりモコンポケット

写真はCHD-5536仕様



CHD-5530 (K)



CHD-5530 (C)

マッサージするときはヘッドレストを後ろに回すかはずしてご使用ください。写真、イラストはイメージです。