


# マッサージャー MD-402

## 取扱説明書

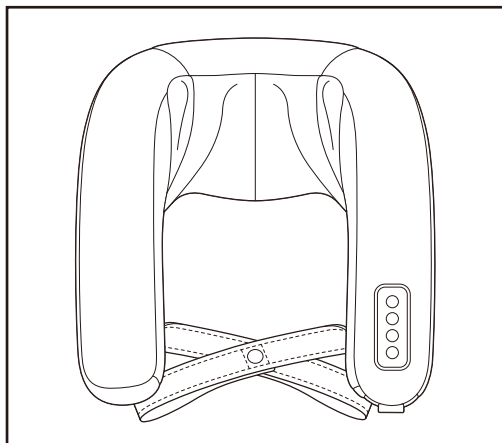

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。  
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

### もくじ

- 安全上のご注意……………1～4
- 各部の名称……………5
- ご使用前に……………6
- 使いかた……………6
- 使用例……………7
- お手入れについて……………8
- 保管について……………8
- 故障かなと思ったら……………8
- 愛情点検について……………9
- 仕様……………9
- アフターサービスについて…10・11
- メモ……………12・13
- 無料修理規定……………14
- 保証書……………裏表紙

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



## 注意

人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



⊙記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



## 警告



強制

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人
- 体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
- 背骨に異常がある人、曲がっている人
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- 温度感覚喪失が認められる人 ●低温やけどをしたことがある人
- 本機を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人

守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。



強制

使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れがないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、アダプターを抜き、修理を依頼してください。) 守らないとけがや感電のおそれがあります。

アダプターは交流100Vで使用する。 守らないと火災や感電の原因になります。

次の人は使用しない。  
医師からマッサージを禁じられている人。  
(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) 症状を悪化させるおそれがあります。

器具用プラグやソケットにホコリが付着しないよう定期的に掃除する。 守らないとホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災のおそれがあります。



禁止

マッサージ以外の目的には使用しない。 また、頭、胸、腹、骨部(ひじ、ひざなど)へは使用しない。 事故やけがのおそれがあります。

ヒーターで機構部中央が熱くなるため、温度や傷みの感覚が弱い人や自らの意志で治療部を動かさない人は使用しない。 低温やけどのおそれがあります。

強く押しつけて使用しない。 皮膚や筋肉を痛める原因になります。

子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。 子供に本機で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。 事故やけが、故障のおそれがあります。

本体の上に立ったり座ったりして使用しない。 転倒による事故やけが、故障のおそれがあります。



本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。 感電やショート、火災の原因になります。

アダプターや器具用プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。アダプターや器具用プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店またはお客様相談センターに修理を依頼する。 そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。



付属以外のアダプターで使用しない。 また、付属のアダプターで他の電気製品を使用しない。 感電やショート、発火の原因になります。



# 安全上のご注意

## 警告




 禁止	コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、アダプターに巻きつけたりしない。 また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。
 分解禁止	絶対に分解や修理、改造をしない。 発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。

## 注意

 強制	1回の使用時間は10分以内にする。 また、一箇所への連続使用は5分以内にする。 守らないと逆効果やけがのおそれがあります。
	使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
	使用後は停止ボタンで動作を止め、アダプターをコンセントから抜く。 守らないと子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。
	アダプターをコンセントから抜くときはアダプターコードを持たず、必ずアダプターを持って引き抜く。 器具用プラグを本体のソケットから抜くときはコードを持たず、必ず器具用プラグを持って引き抜く。 守らないと感電やショート、故障のおそれがあります。
	故障が見つかったら、すぐに使用を止め、アダプターをコンセントから抜く。 守らないと事故やけがのおそれがあります。
 禁止	次のようなときは使用しない。 ● 疲労が激しいとき ● 酒に酔っているとき ● 湿疹が生じているとき 体調不良をおこすおそれがあります。
	食前、食後の1時間は使用しない。 体調不良をおこすおそれがあります。

	他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良をおこすおそれがあります。
	使用中は眠らない。 事故やけがのおそれがあります。
	フトンの中や、毛布をかぶせて使用しない。 発火やモーターの温度上昇の原因になります。
	肌の弱い人は素肌で使用しない。 摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。
	ストープなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 火災のおそれがあります。
	アクセサリーなどの硬いものをつけて使用しない。 機構部に接触してけがのおそれがあります。
	落としたり、強い衝撃をあてない。 事故やけが、故障の原因になります。
	お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しない。 変色、変形の原因になります。
	使用中にアダプターを抜かない。 けがのおそれがあります。
	水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。 感電やショート、故障の原因になります。
 水場使用禁止	浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電や故障の原因になります。
 電源プラグを抜く	使用時以外はアダプターをコンセントから抜く。 守らないとホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災のおそれがあります。
	お手入れの際は、アダプターをコンセントから抜く。 また、ぬれた手でアダプターにふれない。 守らないと感電やけがのおそれがあります。
	停電のときは、アダプターをコンセントから抜く。 守らないと停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。

## 各部の名称

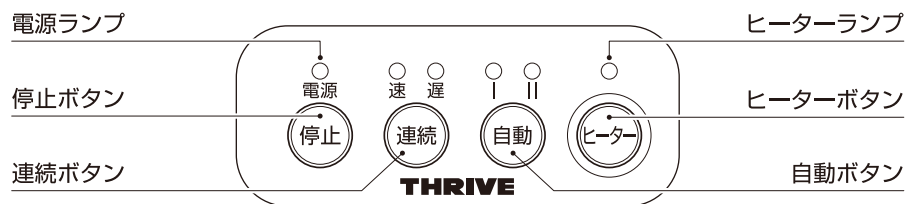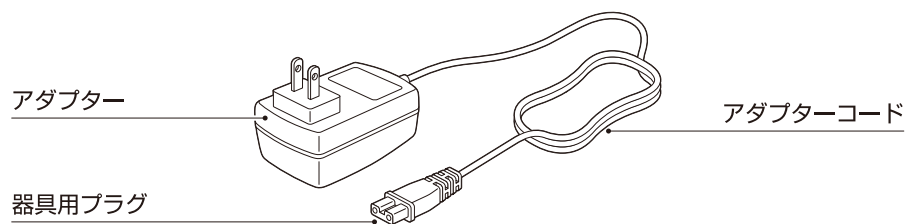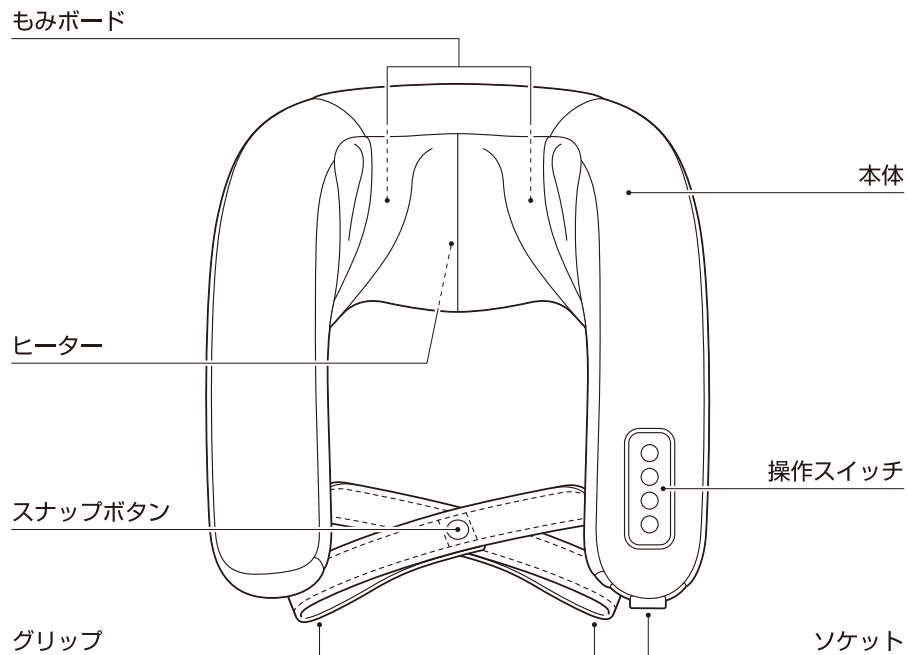

● 付属品は同梱されているものをお使いください。

## ご使用前に

- 器具用プラグとアダプターが確実に接続されているか確認してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。

## 使いかた



1. 器具用プラグを本体のソケットに差ししてください。  
(抜け落ちないように確実に接続する)
2. アダプターをコンセントに差ししてください。電源ランプが点灯します。  
(抜け落ちないように確実に接続する)
3. **連続** ボタンを押すと[連続モード]を開始し、一定の速度でマッサージします。  
ボタンを押すごとに[速][遅]が切り替わります。  
**自動** ボタンを押すと[自動モード]を開始します。  
ボタンを押すごとに[自動I][自動II]が切り替わります。
4. マッサージ動作中にヒーターを追加できます。  
**ヒーター** ボタンを押すと機構部中央が温まります。  
ボタンを押すごとに[入][切]が切り替わります。
5. マッサージを終了したいときは**停止** ボタンを押してください。  
すべての動作が止まります。
6. アダプターをコンセントから抜いてください。
7. 器具用プラグを本体のソケットから抜いてください。

### オートタイマーについて



使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。

## 使用例

グリップを持つ

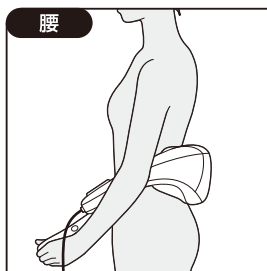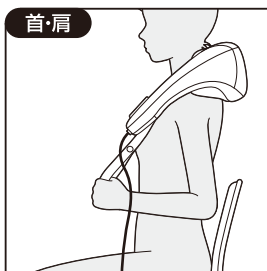

グリップを持たない

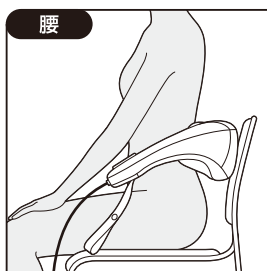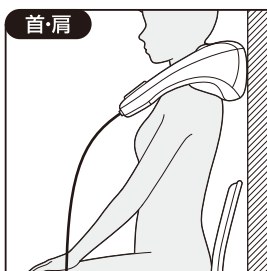

本体背面を壁や椅子の背もたれで支えてお使いください。

- 頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。

摩擦で皮膚を痛めるおそれがあるため素肌のままでは使用せず、タオルなどをあてがい使用する。もみボードの感触を調節する場合もタオルなどをあてがい使用する。

一箇所への連続使用は5分以内にする。  
守らないと低温やけどや逆効果、けがのおそれがあります。

## お手入れについて

乾いた布で汚れをふき取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。  
変色、変形の原因になります。

## 保管について

- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。

## 故障かなと思ったら

機器に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源を切り、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。



症 状	調べるところ
● 張地がすれる音 ● マッサージ動作時の音	● 構造上のもので機能などに影響はありません
● 動作しない	● 器具用プラグ、アダプターが抜けていませんか ● オートタイマーが動き停止状態になっていませんか
● ヒーターボタンを押してもすぐに機構部中央が温まらない	● 機構部中央が温まるまで少し時間がかかりますが異常ありません
● ヒーターボタンを切っても機構部中央が冷えない	● 自然に冷却させるため機構部中央が冷えるまで少し時間がかかります

症 状	直し方
● 連続使用後にマッサージが止まる	● モーターの温度上昇のため、安全装置が働いていますしばらく本体を休ませて(2時間程度)から再度動作を確認してください

上記点検後なお異常音、動作しないなどの異常を感じたらただちに使用を中止してください。アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

## 愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 愛情点検	このような症状はありませんか。 <ul style="list-style-type: none"><li>● こげくさいにおいがする</li><li>● コード、アダプターが異常に熱い</li><li>● コードを動かすと通電したりしなかったりする</li><li>● その他異常がある</li></ul>		故障や事故防止のため使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理をご相談ください。
---	--	---	--

## 仕様

販売名	マッサージャー MD-402
医療機器認証番号	226AKBZX00097000
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 30W(電熱装置2W含む)
本体入力	DC12V 2.5A
アダプター入力	AC100V 50/60Hz
アダプター出力	DC12V 2.5A
定格時間	20分
オートタイマー	約10分
もみ回数	速 約29回/分 遅 約19回/分
外形寸法	幅 約40cm×奥行 約38cm×高さ 約17cm
質量	約1.5kg
アダプターコード長さ	約1.8m
材質	ポリエステル
付属品	アダプター
医療機器製造販売業	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

## アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)  
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合  
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
当社は補修用性能部品の製造打ち切り後最低6年間保有しております。  
(ただし、縫製部品は除きます。)  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合  
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで  
各自治体の取り決めにしたがってください。







製造販売元

**大東電機工業株式会社**

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38  
お客様ご相談センター TEL.06-6783-8627