

もみ感、もみ技が違う!

つかみもみメカ

「つかみもみ」はいいですね、
コリポイントにぐっと入ってくれるので、
肩の疲れがしっかりほぐれます。



テレビなどで活躍中の
元プロテニスプレーヤー
スポーツキャスター

杉山 愛

元プロテニスプレーヤー、グランドスラムでは女子ダブルスで4度の優勝、連続出場62回の世界記録を樹立。オリンピックには4回出場。世界ランクは、シングルス8位・ダブルス1位、2009年10月現役を引退。



つかみもみメカ搭載。 コリに深く、強く、しっかりと届く。


つかみもみマッサージ

肩のコリポイントを、がっちりつかんでほぐす。



エアーマッサージ

肩・座(太もも)・脚(お尻)をエアーバッグでほぐす。

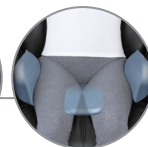

ここが
プロ技!



くつろぎ指定席

マッサージチェア CHD-9006


心とからだ解放されるとっておきの席。
特別なひとときで癒やされるマッサージチェア。

つかみもみメカが、上下左右をより深く、しっかりもみ込む、ググッと押し込む、プロ技マッサージでコリをとことんほぐす。




横回転もみ玉ともみアームが同時に動作することで、肩を「つかみもみ」するマッサージを実現。

上の「横回転もみ玉」で肩を大きくとらえ、下の「もみアーム」がコリのポイントに深く入って押し上げます。

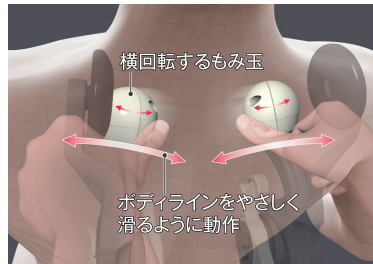


横回転もみ玉
●回転することで余計な力を分散。
●親指で「こねる」ような手もみ感覚を実現。

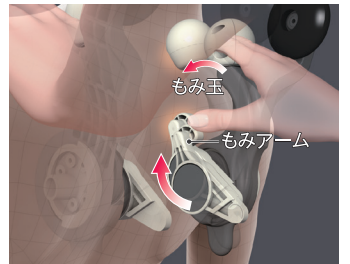

もみアーム
●親指が肩甲骨周りに深く入って押し上げる。

肩・太もも・お尻をエアバッグでマッサージ。 エアバッグ搭載

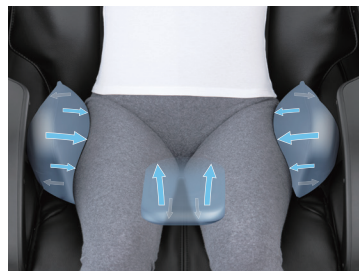

脚は[弱][強]2つのモード設定が可能。 エアバッグ搭載



①足裏突起 (Heel protrusion)

多彩な機能を簡単操作でどうぞ。

自動コース(全身・肩・腰)
治療部を効果的にマッサージするようにプログラムされた3種類の自動コースからお選びいただけます。

手動コース
背すじマッサージ(つかみもみ、もみたたき、たたき、背すじ全体・部分)、肩、座、脚マッサージ(弱・強)の単独、複合マッサージをお選びいただけます。

使い過ぎ・切り忘れ防止 **15分オートタイマー**

電動リクライニング
新リクライニング機構は、背もたれ角度が、約160°まで可能になりました。

●背もたれ角度:約120°~約160°
※従来機種CHD-5536比較:約120°~約145°

外形寸法

幅 約70cm | 奥行 約142cm | 高さ 約95cm
○背もたれ/フットレスト収納状態

幅 約190cm | 高さ 約64cm
○背もたれ/フットレスト出た状態

仕様

●販売名:マッサージチェア CHD-9006 ■医療機器認証番号:227AKBZX00057A01 ■医療機器の種類:管理医療機器 ■一般名称:家庭用電気マッサージ器 ■定格電圧:AC100V ■定格周波数:50/60Hz ■定格入力:101W ■定格時間:20分 ■オートタイマー:約15分 ■肩位置調節:7段階 ■もみ玉幅調節:無段階 ■もみ玉速さ:約18回/分 ■たたき速さ:約385回/分 ■背すじ全体速さ:約108秒(往復) ■背すじ全体移動距離:約56cm(治療最長距離) ■背すじ部分移動距離:約9cm ■エアマッサージ空気圧:80kPa以下 ■背もたれ角度:約120°~約160° ■質量:約41kg ■電源コード長さ:約2m ■張地:合成皮革 ■付属品:ヘッドレスト、ひじ掛け、座クッション、六角レンチ、取付ネジ ■医療機器製造販売業:大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号 ■医療機器製造販売許可番号:27B2X00055 ■標準価格:オープン価格

○電気代目安 約82円/月(1日1時間使用)新電力料金目目安価27円/kWhで計算
写真、イラストはイメージです。マッサージするときはヘッドレストを後ろに回すかはずしてご使用ください。

安全に関するご注意 ご使用の前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください

◎医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症性の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●その他医療機関で治療中の人【**守らないと事故や体調不良をおこす可能性があります**】 ●使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れがないか確認する(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)【**守らないとけがや感電のおそれがあります**】 ◎次の人は使用しない ●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)【**症状を悪化させるおそれがあります**】 ◎次のようなときは使用しない ●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき【**体調不良をおこすおそれがあります**】 ●子供だけで使わず、自分で操作できない人に使わせない ●子供に本機で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない【**事故やけが、故障のおそれがあります**】 ●絶対に分解や修理、改造をしない【**発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります**】

お求めは当店どうぞ……

●製品の仕様は改良により予告なく変更することがあります。 ●製品の色は印刷物ですので、実物とは色が若干異なることがあります。 ●製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。 ●ホームページアドレス <http://www.daito-thrive.co.jp>

製造販売元
大東電機工業株式会社
〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

●商品のお買い、取り扱い方法、修理などのお問い合わせはお客様ご相談センター 受付時間:9:00~17:00(祝日を除く月~金)

ナビダイヤル **0570-064-762**

○ナビダイヤルがご利用できない場合
TEL.06-6783-8627 FAX.06-6783-8633

記載内容は2016年1月現在のものです