



杉山 愛さん ファミリー

THRIVE

スライヴ

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用 ・疲労回復 ・血行をよくする ・筋肉の疲れをとる ・筋肉のこりをほぐす ・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 一般家庭で使用する

医療機器の安全上のご注意

ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。

○ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ○悪性腫瘍のある人 ○心臓に障害のある人 ○妊娠中や出産直後の人 ○糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ○皮膚に創傷のある人 ○安静を必要とする人 ○体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ○骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ○背骨に異常がある人、曲がっている人 ○けんしょう(腱鞘)炎の人 ○かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ○その他医療機関で治療中の人

●事故や体調不良の原因になります。

使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。

その他の部分にも破れがないか確認する(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)。

●けがや感電の原因になります。

次の人は使用しない。

医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)

●症状を悪化させる原因になります。

次のようなときは使用しない。

○疲労が激しいとき ○酒に酔っているとき ○湿疹が生じているとき

●体調不良をおこす原因になります。

乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。

●事故やけがの原因になります。

製造販売元
大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お客様ご相談センター 受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

0570-064-762 ナビダイヤル

一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用できない場合

TEL.06-6783-8627 FAX.06-6783-8633



表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
右記販売店にご相談ください。
または、大東電機工業お客様ご相談センターにご連絡ください。

○製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
○製品の色は印刷物ですので実物とは色が若干異なることがあります。
○製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。

daito-thrive.co.jp



元プロテニスプレーヤー
スポーツコメンテーター

杉山 愛

スライヴ イメージキャラクター



THRIVE

くつろぎ指定席

マッサージチェア CHD-9080

医療機器認証

しっくりと、ゆったりと
疲れをほぐす贅沢タイム。



記載内容は2022年3月現在のものです

首/肩、背中から腰はもみ玉が、脚はもみボードと突起ローラーがマッサージ。
お好みに合わせて、自動コースと手動が選べます。



くつろぎ指定席

マッサージチェア CHD-9080

医療機器認証

(BK)ブラック



Vフォームポジション

おしりを支点にV字体勢をとることで、体重の負荷により身体に深くもみ玉が当たります。背もたれ角度は約122°から約144°の間で調節可能です。

自動コース

施療部を効果的にマッサージするようにあらかじめ設定された3種類のコースから選べます。

- 全身** 背中全体を自動でマッサージ。
- 肩** 肩を中心に自動でマッサージ。
- 腰** 腰を中心に自動でマッサージ。

もみ玉が横回転することで…

親指で、じっくりと「こねる」ような手もみ感覚を実現しました。首/肩をはじめとする、背すじ全体の凹凸形状をやさしく滑るようにとらえ、余分な力を分散し、なめらかな動きでマッサージします。

横回転
もみ玉



手動

背すじマッサージの単独動作、複合動作が選べます。

単独動作

- もみ** **もみたたき** **背すじ** **脚**

複合動作 (4つの動作を組み合わせて7種類のマッサージができます)

- もみ** + **背すじ**
- もみ** + **脚**
- もみたたき** + **背すじ**
- もみたたき** + **脚**
- 背すじ** + **脚**
- もみ** + **背すじ** + **脚**
- もみたたき** + **背すじ** + **脚**

脚マッサージ

もみボードと突起ローラーが、脚をマッサージします。

もみ玉マッサージ




首/肩まわりのマッサージ



腰まわりのマッサージ

もみボードマッサージ

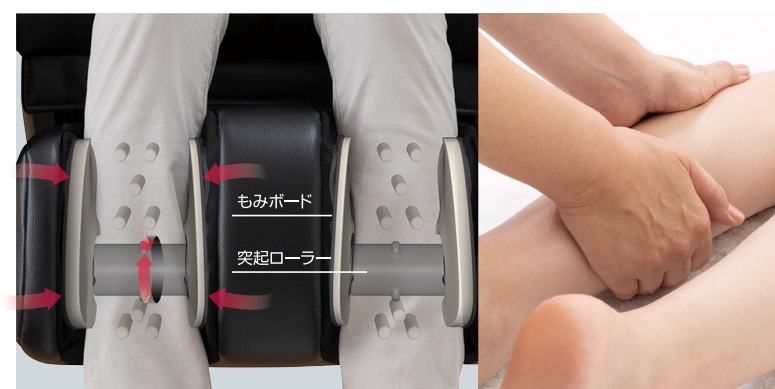

ふくらはぎのマッサージ

製品仕様

販売名	マッサージチェア CHD-9080
カラー	(BK)ブラック
医療機器認証番号	303AKBZX00014000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 71W
定格時間	20分
オートタイマー	約15分
肩位置調節	5段階
もみ玉幅調節	無段階
もみ回数(背面)	約18回/分
たたき回数(背面)	約360回/分
背すじ全体速さ(往復)	約90秒
背すじ全体移動距離(最長)	約61cm
脚もみ回数	約13回/分
ローラー自転回数(脚)	約13回/分
背もたれ角度	約122°~約144°
質量	約39kg
電源コード長さ	約2m
張地	合成皮革、ポリエステル
付属品	ヘッドレスト、ひじ掛けパネル、座クッション
JANコード	(BK)ブラック 4975287608941
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

メーカー希望小売価格 オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください)


電気代の目安(月):28円(1日30分使用) 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算(当社調べ)

外形寸法

背もたれ 起きた状態/フットレスト 下げた状態 背もたれ 倒れた状態/フットレスト 上げた状態



○梱包時1台箱寸法

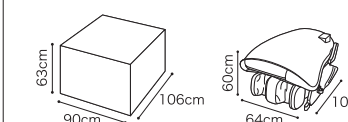

○開梱時本体寸法



ひじ掛けパネルが外れた状態で梱包されていますので、スムーズな搬入が可能です。設置場所までの搬入経路をご確認ください。

○1台箱重量: 約48kg