

THRIVE

NEW STYLE

くつろぎ指定席
マッサージチェア
CHD-9204

コリがほぐれる実感、全身に届く。

首・肩から腰、腕、太もも・おしり、脚の頑固なコリを施療。





もみメカとエアバッグでつらいコリを心地よくマッサージします。

THRIVE
スライヴ




エアの圧力でほぐす。

- ① **肩** エアバッグで、肩周辺を加圧、減圧しながらほぐします。
- ② **腕** エアバッグで、腕を加圧、減圧しながらほぐします。
- ③ **座** エアバッグで、太ももとおしりを加圧、減圧しながらほぐします。
- ④ **脚** エアバッグで、ふくらはぎ・足を加圧、減圧しながらほぐします。突起は、足裏全体を刺激します。

- ⑤ **フットレスト延伸** 背の高い人や脚の長い人が使用する際に、最長14cm伸ばすことができます。



ちょうどいい位置でほぐすもみ玉。

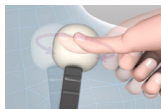

横回転もみ玉
横回転もみ玉は、体のラインに沿って、親指で「こねる」ようなもみ技で施療します。

- 幅調節:もみ玉の幅を無段階で調節できます。
- 肩位置設定:肩位置の高さを5段階から選択できます。
- 上下調節:もみ玉の位置を上下調節できます。

NEW STYLE

くつろぎ指定席 マッサージチェア CHD-9204



仕様
●販売名:マッサージチェアCHD-9204 ●医療機器認証番号:231AGBZX00020000 ●医療機器の種類:管理医療機器 ●一般名称:家庭用電気マッサージ器 ●定格:AC100V 50/60Hz 80W ●定格時間:20分 ●もみ回数(背面):約22回/分 ●たたき回数(背面):約330回/分 ●背すじ全体速さ(往復):約78秒 ●背すじ全体移動距離(最長):約70cm ●背すじ部分移動距離:約10cm ●エアーマッサージ空気圧:80kPa以下 ●質量:約42.5kg ●電源コード長さ:約2m ●張地:合成皮革、ポリエステル ●付属品:ヘッドレスト、ひじ掛けパネル、座クッション ●製造販売元:大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38 ●医療機器製造販売業許可番号:27B2X00055 ●JANコード:(BK)ブラック 4975287607906 ●メーカー希望小売価格:199,800円(税別)

使用目的または効果	あんな、マッサージの代用 ・疲労の回復 ・血行の促進 ・筋肉の疲れをとる ・筋肉のコリをほぐす ・神経痛、筋肉痛をやわらげる	一般家庭で使用すること
------------------	---	-------------

多彩なコースでマッサージ。



- 自動コース**
施療部を効果的にマッサージするようにあらかじめ設定された3種類[全身][肩][腰]から選べます。
- 手動**
背すじマッサージ[もみ][たたき][もみたたき][背すじ全体][背すじ部分]の単独、複合動作が選べます。

外形寸法



電動リクライニング
背もたれ角度:約113°~約137°

幅 約76cm

奥行 約120cm

奥行 約155cm

高さ 約112cm

高さ 約87cm

15分オートタイマー

電代目安(月):64円

(1日1時間使用/電力料金目安単価27円/kWhで計算)

安全上のご注意

ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●けんしゅう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたこと、または疾患部へ使用する人 ●本品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人 ●事故や体調不良の原因になります。使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。その他の部分にも破れがないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) ●けがや感電の原因になります。次の人は使用しない。医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈けいゆう(痛)、急性静脈けいゆう(痛)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) ●症状を悪化させるおそれがあります。次のようなときは使用しない。●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき ●体調不良をおこすおそれがあります。子供には使用させない。(乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。) ●事故やけがのおそれがあります。機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。

お求めは当店へどうぞ……

製造販売元
大東電機工業株式会社
〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号
お問い合わせは お客様ご相談センター
受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)
ナビダイヤル **0570-064-762**

大東電機工業
daito-thrive.co.jp



表示を正しく
家電公取協

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷物ですので実物とは色が若干異なることがあります。●製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。

大東電機工業は、適正な表示を推進しています。