


保管用

THRIVE

保証書付

マッサージャー MD-1850

取扱説明書

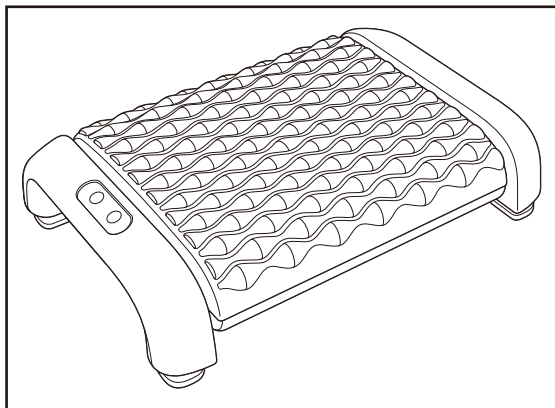

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。

- 疲労回復
 - 血行をよくする
 - 筋肉の疲れをとる
 - 筋肉のこりをほぐす
 - 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
- 一般家庭で使用すること。

もくじ

- 安全上のご注意……………1～4
- 各部の名称……………5
- ご使用前に……………6
- 使用方法……………6
- 使用例……………7・8
- 使用上のご注意……………8
- お手入れについて……………8
- 保管について……………9
- 故障かなと思ったら……………9
- 愛情点検について……………9
- 仕様……………10
- アフターサービスについて…10・11
- メモ……………12・13
- 無料修理規定……………14
- 保証書……………裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



⓪記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制・指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



強制

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。



- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人
- 体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
- 背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けんしょう(腱鞘)炎の人
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- 本品を使用しても効果がみられない人
- その他医療機関で治療中の人




事故や体調不良をおこす原因になります。

<p>強制</p>	<p>交流100Vで使用する。 火災や感電の原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>電源プラグを定期的に掃除する。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり漏電火災の原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>次の人は使用しない。 医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)症状を悪化させる原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>マッサージ以外の目的には使用しない。 また、頭、首、胸、腹、骨部へは使用しない。 事故やけがの原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>強く押しつけて使用しない。 皮膚や筋肉を痛めたり、故障の原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。 事故やけがの原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。 事故やけがの原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>本体の上に乗らない。 事故やけが、故障の原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>振動板まわりのすき間に手や足を入れない。 事故やけがの原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。 感電やショート、火災の原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。電源コードや電源プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理を依頼する。 そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。 また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。</p>
<p>分解禁止</p>	<p>機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡する。電源コードが破損した場合、危険ですのでお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに交換の依頼をする。 機器は改造しない。 火災や感電、けがの原因になります。</p>



安全上のご注意

⚠ 注意

 強制	<p>1日の使用時間は10分以内にする。 また、一箇所の連続使用は3分以内にする。 逆効果やけがの原因になります。</p>
	<p>はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用する。 強い刺激に慣れていないと逆効果やけがの原因になります。</p>
	<p>使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。 事故や体調不良をおこす原因になります。</p>
	<p>使用後は停止ボタンで動作を止め、電源プラグをコンセントから抜く。 子供のいたずらによる事故やけがの原因になります。</p>
	<p>使用後は、電源コードのねじれをほどいて保管する。 断線やショートの原因になります。</p>
	<p>電源プラグを抜くときは、接続部に無理な力をかけないように、 必ず電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートの原因になります。</p>
	<p>故障が見つかったら、すぐに使用を止め、電源プラグをコンセントから抜く。 事故やけがの原因になります。</p>
	<p>次のようなときは使用しない。 ● 疲労が激しいとき ● 酒に酔っているとき ● 湿疹が生じているとき 体調不良をおこす原因になります。</p>
 禁止	<p>食前、食後の1時間は使用しない。 体調不良をおこす原因になります。</p>
	<p>他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良をおこす原因になります。</p>
	<p>使用中は眠らない。 事故やけがの原因になります。</p>
	<p>フトンや毛布をかぶせたり、コタツの中に入れて使用しない。 発火やモーターの温度上昇の原因になります。</p>

 禁止	<p>肌の弱い人は素肌で使用しない。 事故やけがの原因になります。</p>
	<p>ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 また、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない。 火災の原因になります。</p>
	<p>施療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しない。 けがの原因になります。</p>
	<p>椅子で使用する場合は、背もたれに下振動板を接触させない。 背もたれを傷める原因になります。</p>
	<p>落としたり、強い衝撃をあたえない。 感電やけが、故障の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンや ドライヤーは使用しない。 変色、変形の原因になります。</p>
	<p>使用中に電源プラグを抜かない。 けがの原因になります。</p>
	<p>水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。 感電やショート、故障の原因になります。</p>
 水場使用禁止	<p>浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電やショート、故障の原因になります。</p>
 電源プラグを抜く	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、 漏電火災の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手でプラグにふれない。 感電ややけどの原因になります。</p>
	<p>停電のときは、電源プラグをコンセントから抜く。 停電復帰時に事故やけがの原因になります。</p>

各部の名称

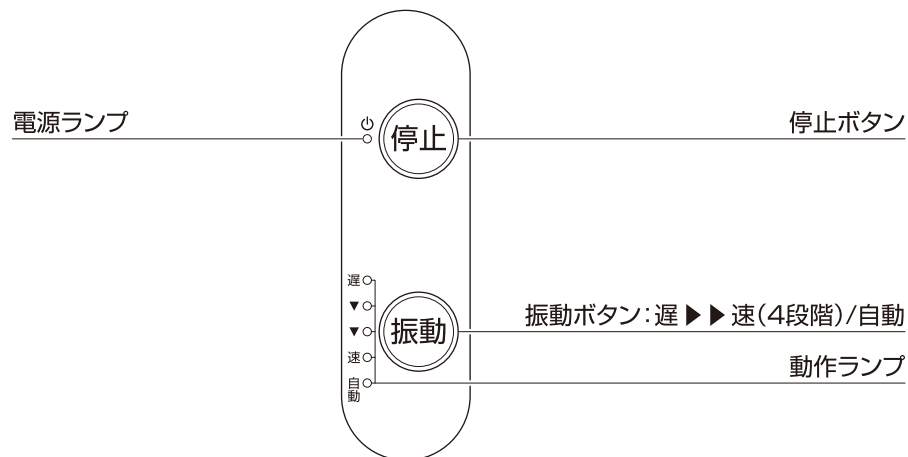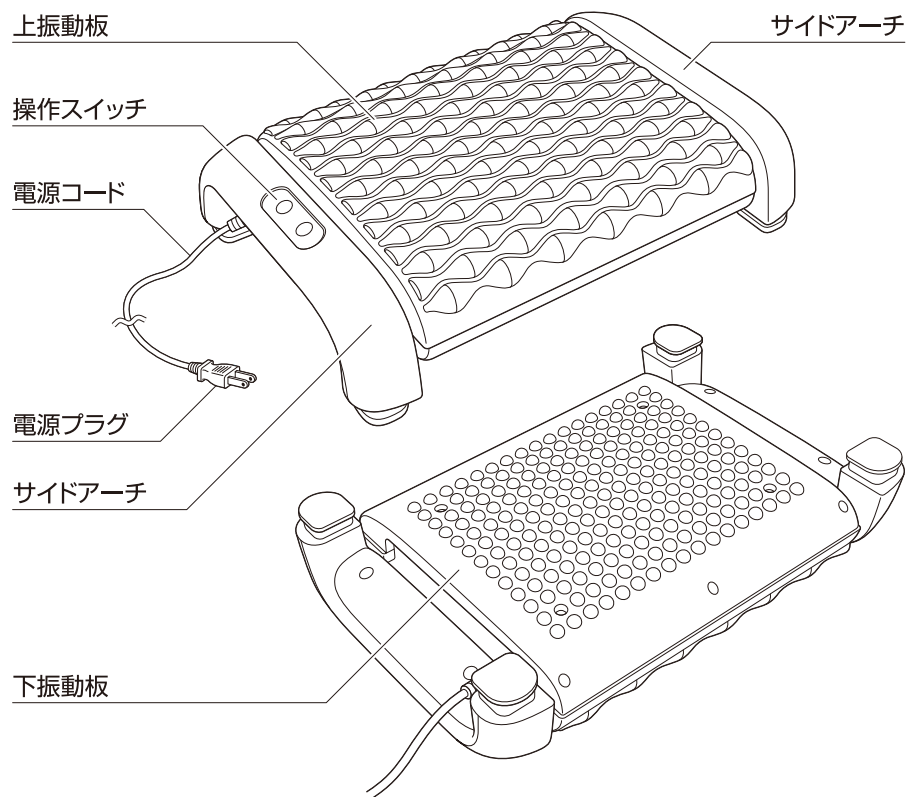

ご使用の前に

上・下振動板が破損した状態で使用しないでください。
破損があるときはただちに使用を中止してください。

- 上・下振動板が破損した場合は使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
- 施療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しないでください。事故やけが、故障の原因になります。
- 頭、首、胸、腹、骨部へは使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。(電源コードが抜け落ちないように確実に接続する)。
- 操作スイッチが正しく動作するか確認してください。

使用方法

- 使用中の動作音をやわらげるとともに、床を傷つけないためにマット等を敷くことをおすすめします。また、椅子で使用する場合は、背もたれに下振動板を接触させないでください。

1. **振動** ボタンを押してください。

ボタンを押すごとに
[遅 ▶▶ 速 (4段階)] [自動] の順番に切り替わります。
自動は振動板の速度を切り替えながら動作します。


2. マッサージを終了したいときは **停止** ボタンを押してください。

動作が止まります。


3. 電源プラグをコンセントから抜いてください。

オートタイマーについて



使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。

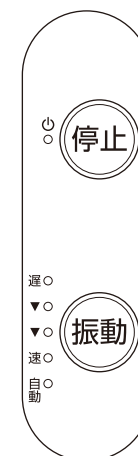


使用例

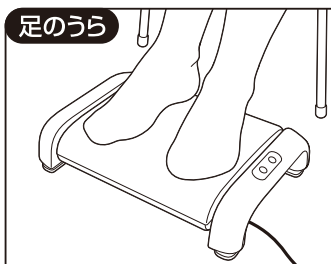

椅子に座って使用してください。

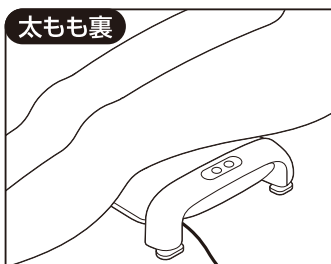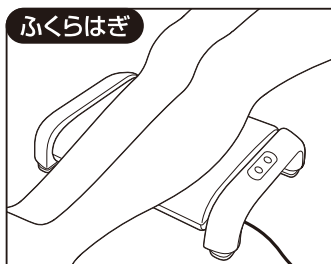

安全のため、手は上振動板の上に置いてください。

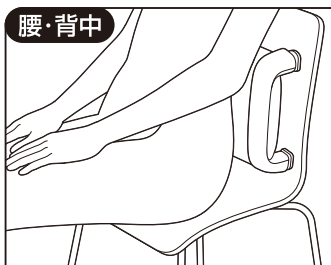

下振動板を椅子に接触させないでください。




- 振動板まわりのすき間に手や足を入れないでください。
- 振動の刺激が強過ぎるときは、タオルなどをあてがい感触を調節してください。

ご注意

本品の上に直接立ったり、座ったり、負荷をかけすぎると破損や故障の原因になりますのでおやめください。

必ず7ページの使用例で示すような使い方をしてください。

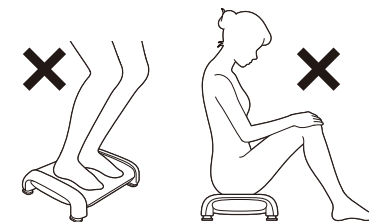

使用上のご注意

- 整髪料・化粧品などの薬品を接触させないでください。
化学変化による変色や劣化の原因になります。
- 直射日光を毎日長時間あてないでください。
変色や劣化の原因になります。
- ビニールや室内の壁紙などに長時間接触させないでください。
変色する原因になります。

お手入れについて

乾いた布で汚れをふき取ってください。
シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しないでください。
変色、変形の原因になります。

保管について

- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- 電源コードはねじれをほどこいて保管してください。

故障かなと思ったら

点検、修理を依頼される前に下記のご確認をお願いします。



症 状	調べるところ
● マッサージ中の音	● 構造上発生するもので機能に影響はありません
● 動作しない、動作が止まる	● 電源ランプがついていますか ● 電源プラグが抜けていませんか ● オートタイマーが働き停止状態になっていませんか

症 状	直し方
● 連続使用時にマッサージが止まる	● モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています しばらく本体を休ませて(2時間程度)から再度動作を確認してください

機器に異常音や動作しないなどの異状や故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 愛情点検	<p>このような症状はありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● こげくさいにおいがする ● 電源コード、プラグが異常に熱い ● 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする ● その他異常がある 		<p>故障や事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理をご相談ください。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

仕様

販売名	マッサージャー MD-1850
医療機器認証番号	303AHBZX00021000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 41W
定格時間	20分
オートタイマー	約10分
振動回数	約2150～約2900回/分
外形寸法	幅 約42cm×奥行 約29cm×高さ 約10.5cm
質量	約3.6kg
電源コード長さ	約2m
材質	上振動板:EVA樹脂 下振動板、サイドアーチ:ABS樹脂
製造販売元	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
当社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

保証書

持込修理

マッサージャー MD-1850

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間

お客様	
フリガナ	
お名前	様
ご住所 〒	
	電話
販売店	

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

(P14の無料修理規定をご覧ください)。

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38