


MOMIGEAR

スライヴ フットマッサージャー もみギア

MD-4201

取扱説明書 保証書付

このたびはスライヴ フットマッサージャー もみギアをお買い上げいただき、ありがとうございました。この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

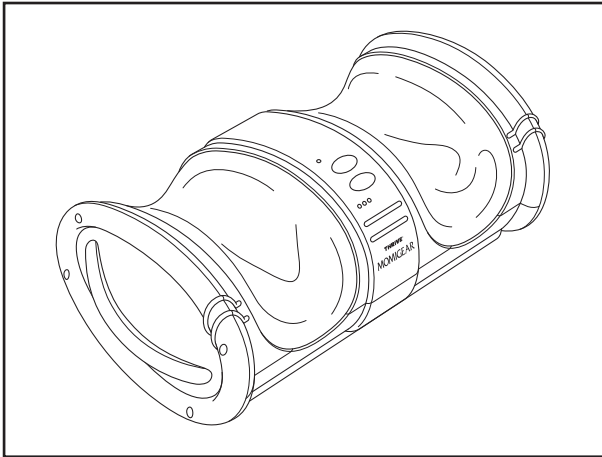

もくじ

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ● 安全上のご注意……………1～4 | ● 保管について……………7 |
| ● 各部の名称……………5 | ● 故障かなと思ったら……………7 |
| ● ご使用の前に……………5 | ● 愛情点検について……………7 |
| ● 使いかた……………6 | ● 仕様……………8 |
| ● 使用例……………6 | ● アフターサービスについて…8・9 |
| ● お手入れについて……………6 | ● 保証書……………裏表紙 |

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



○記号は、「禁止」の行為であることを告げる内容です。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。






警告



強制



医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。




- ペースメーカー等の電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人
 - 悪性腫瘍のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 妊娠中や出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人
 - 体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)
 - 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
 - かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
 - 本機を使用しても効果がみられない人
- 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

 <p>強制</p>	<p>使用前に布カバーが破れていたり、はずれていないかを確認する。 (どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、 修理を依頼してください。) 守らないとけがや感電のおそれがあります。</p>
	<p>交流100Vで使用する。 守らないと火災や感電の原因になります。</p>
	<p>次の人は使用しない。 医師からマッサージを禁じられている人。 (例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎 および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) 症状を悪化させるおそれがあります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>足と脚のマッサージ以外の目的には使用しない。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>強く押しつけて使用しない。 皮膚や筋肉を痛める原因になります。</p>
	<p>子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。 子供に本機で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。 事故やけが、故障のおそれがあります。</p>
	<p>本体の上に立って使用しない。 転倒による事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>本体とモミボードおよびローラーのすき間に手や足などを入れない。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。 感電やショート、火災の原因になります。</p>
	<p>電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない。電源コードや電源プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店 または「お客様ご相談センター」に修理を依頼する。 そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。</p>
	<p>電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。 また、重いものを載せたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。</p>
 <p>分解禁止</p>	<p>絶対に分解や修理、改造をしない。 発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。</p>


安全上のご注意

注意


 強制	<p>1回の使用時間は20分以内にする。 また、一箇所の連続使用は5分以内にする。 守らないと逆効果やけがのおそれがあります。</p>
	<p>使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。 守らないと事故や体調不良を起こすおそれがあります。</p>
	<p>使用後は電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、 必ず電源プラグを持って引き抜く。 守らないと感電やショートのおそれがあります。</p>
	<p>故障が見つかったら、すぐに使用を止め、電源を切る。 守らないと事故やけがのおそれがあります。</p>
 禁止	<p>次のようなときは使用しない。 ● 疲労が激しいとき。 ● 酒に酔っているとき。 ● 湿疹が生じているとき。 体調不良を起こすおそれがあります。</p>
	<p>食前、食後の1時間は使用しない。 体調不良を起こすおそれがあります。</p>
	<p>他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良を起こすおそれがあります。</p>
	<p>使用中は眠らない。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>フトンの中や、毛布をかぶせて使用しない。 発火やモーターの温度上昇の原因になります。</p>

 <p>禁止</p>	<p>ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 火災のおそれがあります。</p> <p>落としたり、強い衝撃をあたえない。 感電やショート、故障の原因になります。</p> <p>お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しない。 変色、変形の原因になります。</p> <p>使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「OFF」にしない。 けがのおそれがあります。</p>
 <p>水場使用禁止</p>	<p>浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電や故障の原因になります。</p>
 <p>電源プラグを抜く</p>	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 守らないとホコリや湿気で絶縁劣化による、漏電火災の原因になります。</p> <p>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手で抜き差ししない。 守らないと感電ややけどのおそれがあります。</p> <p>停電のときは電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。</p>

各部の名称

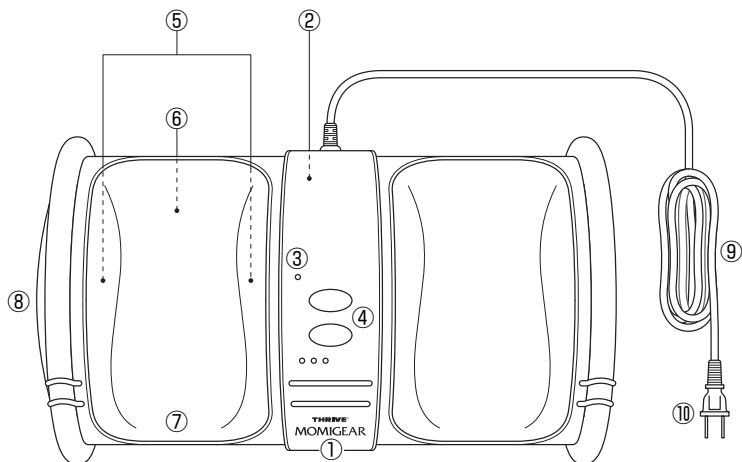

- | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|
| ① 本体 | ④ 操作ボタン | ⑦ 布カバー | ⑩ 電源プラグ |
| ② 主電源スイッチ(本体後面) | ⑤ モミボード | ⑧ グリップ | |
| ③ 主電源ランプ | ⑥ ローラー | ⑨ 電源コード | |

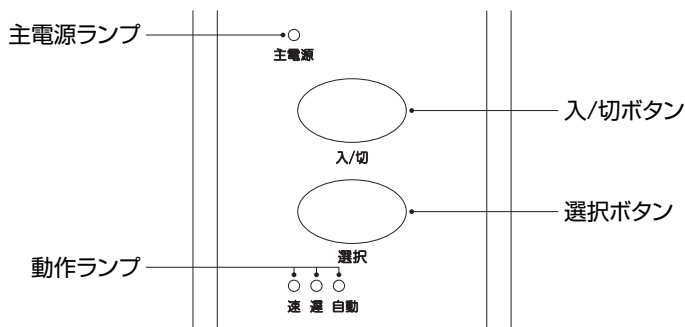

ご使用の前に

- 電源コードは確実に接続されているか確認してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。


使いかた

- 使用中の動作音をやわらげるためと、床を傷つけないためにマット等を敷くことをおすすめします。
- 1.電源プラグをコンセントに差し込んでください。(電源コードが抜け落ちないように確実に接続する。)
 - 2.本体後面にある主電源スイッチを「ON」にしてください。主電源ランプが点灯します。
 - 3.入/切ボタンを押してください。速い動作でマッサージします。動作ランプが点灯します。
 - 4.選択ボタンを押してください。
ボタンを押すごとに「遅 — 自動 — 速」の順番に切り替わります。
それぞれの動作ランプが点灯します。自動は「速 — 遅」をくり返して動作します。
 - 5.入/切ボタンで動作を停止させてください。主電源スイッチを「OFF」にしてください。
主電源ランプが消灯します。
 - 6.電源プラグをコンセントから抜いてください。

オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約20分で自動的に止まります。

使用例

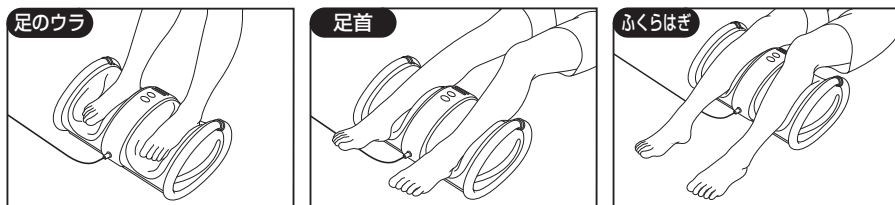

モミボードの刺激が弱過ぎるときや、ローラーの刺激が強過ぎるときは、タオルなどをあてがい感触を調節してください。

お手入れについて

- 本体 ———— めるま湯でうすめた少量の中性洗剤を柔らかい布にひたし、よく絞って汚れをふき取ってください。そのあと、水をひたした布をよく絞ってふき、乾いた布で軽くふいてください。
シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。
変色、変形の原因になります。
- 布カバー ———— ブラシを掛けた後、中性洗剤を浸した布を硬くしぼり汚れを拭きとってください。

保管について

- 子供のいたずらなどによる事故を防止するために、電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない所に保管してください。
- しばらくご使用にならない時はカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。

故障かなと思ったら



機器に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源を切り、お買い上げ販売店または「お客様ご相談センター」に点検、修理を依頼してください。

症 状	調べるところ
<ul style="list-style-type: none">● 張地とその他がすれる音● マッサージ動作時のモーター音	<ul style="list-style-type: none">● 構造上のものので機能等に影響はありません
<ul style="list-style-type: none">● 動作しない	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグが抜けていませんか● 電源スイッチが切れていませんか● オートタイマーが動き停止状態になっていませんか
症 状	直し方
<ul style="list-style-type: none">● 連続使用後にマッサージが止まる	<ul style="list-style-type: none">● モーターの温度上昇のため、安全装置が働いていますしばらく本体を休ませて(2時間程度)から再度動作を確認してください

上記点検後なお異常音、動作しないなどの異常を感じたらただちに使用を中止してください。電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または「お客様ご相談センター」に点検、修理を依頼してください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に作動することを確認してください。

 愛情点検	<p>このような症状はありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none">● こげくさいにおいがする。● 電源コード、プラグが異常に熱い。● コードを動かすと通電したり、しなかったりする。● その他異常がある。	 <p>故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げ販売店または「お客様ご相談センター」に点検・修理をご相談ください。</p>
---	--	--

仕様

販売名	スライヴ フットマッサージャー もみギア MD-4201
医療機器認証番号	221AGBZX00088000
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力	40W
定格時間	20分
オートタイマー	約20分
もみ	速 約33回/分 遅 約14回/分
外形寸法	幅 約46cm×奥行 約29cm×高さ 約20cm
質量	約5kg
電源コード長さ	約2m
材質	本体:ABS樹脂 布カバー:ポリエステル
医療機器製造販売業	大東電機工業株式会社 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
当社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。
(ただし、縫製部品は除きます。)
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または
「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで
各自自治体の取り決めにしたがってください。

お客様ご相談センターのご案内

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げ販売店へお申し付けください。

修理などのご相談は

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-003-532

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00】

(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

※お客様がご加入されている電話(NTT以外の一般回線、PHS、及びIP電話等)によっては、ご利用できない場合がございますので、下記の電話番号へおかけください。

岡山大東電機工業株式会社

TEL.0867-22-3482 FAX.0867-22-3873

〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷1503-1

商品・お取扱いなどのご相談は

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-003-531

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00】

(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

※お客様がご加入されている電話(NTT以外の一般回線、PHS、及びIP電話等)によっては、ご利用できない場合がございますので、下記の電話番号へおかけください。

スライヴ株式会社

TEL.06-6783-8627 FAX.06-6783-8633

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

保 証 書

スライヴ フットマッサージャー もみギア MD-4201

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間

お客様	
フリガナ	
お名前	様
ご住所 〒	
	電話

販売店

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
 - お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
 - 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
 - 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
 - 指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。

販売元

スライヴ 株式会社

製造販売元

大東電機工業株式会社