

医療機器認証商品

12層のエアバッグが、
脚にぴったりフィットし、しぼりもみ。





フットマッサージャー
MD-8707



製品仕様

販売名……………フットマッサージャー MD-8707
 カラー……………(PL)パール・(BZ)ブロンズ
 医療機器認証番号…302AKBZX00023000
 医療機器の種類…管理医療機器
 一般的名称…………家庭用電気マッサージ器
 定格……………AC100V 50/60Hz 40W
 定格時間……………20分
 エアー圧力……………80kPa以下
 オートタイマー……………約10分

足裏ローラー自転回数…約6回/分～約10回/分
 外形寸法……………幅約42.5×奥行約41×高さ約44(cm)
 質量……………約5kg
 電源コード長さ……………約2m
 材質……………本体：ABS樹脂 エアバッグ：ポリエステル(外生地)、
 ………………ナイロン、ポリウレタン(内生地)
 JANコード……………(PL)パール 4975287608415
 ………………(BZ)ブロンズ 4975287608422

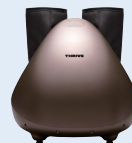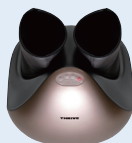

安全上のご注意 ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人●けんしょう(腱鞘)炎の人●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●本品を使用しても効果が見られない人 ●その他医療機関で治療中の人の
 ◎事故や体調不良をおこす原因になります。

使用前に必ずエアバッグの張地が破れていないか確認する(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)。
 ◎けがや感電の原因になります。

次の人は使用しない●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓(塞栓)症、重度の動脈けいゆう(痛)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)。
 ◎症状を悪化させる原因になります。

自分で意思表示できない人に使わせない(安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供(乳幼児以外)や補助を必要とする人に使わせない)。
 ◎事故やけがの原因になります。

機器が故障したり張地が破れた場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用 | 疲労の回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる | 一般家庭で
 ・筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 | 使用すること

メーカー希望小売価格
39,800円(税別)

電気代目安 16円(月)
電力料金目安単価27円/kWhで計算(1日30分使用)

●お求めは当店どうぞ……

オフィシャルサイト



大東電機工業
daito-thrive.co.jp

QRからモバイルサイトへどうぞ

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは お客様ご相談センター

受付 9:00～17:00(祝日を除く、月～金)

ナビダイヤル **0570-064-762**

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
 ●製品の色は印刷物ですので、実物とは色が若干異なることがあります。
 ●写真、イラストはイメージです。

©2020 Daito Electric Machine Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

疲れた脚を包み込み、
エアールの力でもみほぐし。



足先からふくらはぎまで包み込む、12層のエアールバッグ。

疲れやむくみを感じた脚を、加圧・減圧でしぼりもみマッサージ。



- モード** プログラムされた3種類のモードから選べます。
- 全体 ● 足 ● ふくらはぎ ●
- モード**
- 全体 足先、足、ふくらはぎのエアールバッグが、複合動作しながらマッサージ。
 - 足 足先、足のエアールバッグが、交互に動作しながらマッサージ。
 - ふくらはぎ 足、ふくらはぎのエアールバッグが、交互に動作しながらマッサージ。
- 強さ** エアールバッグの強さは、3種類から選べます。
- 弱 ● 中 ● 強 ●
- ローラー** 足裏にあるローラーの回転を、2種類から選べます。(ローラーのみのマッサージも可能)
- 連続 ● 自動 ●
- ローラー**
- 連続 一定の速度でマッサージ。
 - 自動 回転と停止を異なる動きでマッサージ。

傾けても使えるので、お好みに合わせてマッサージ。



基本

傾けて使用できます

●キャスター付きの椅子に座って使用しないでください。

10分オートタイマー 使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動停止。